


# EINWEGPUMPE WANDSPENDER PLUS

Hygienisch sicher – einfach in der Anwendung

## EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffpumpe zur einmaligen Verwendung im Wandspender plus
- Schnelle und leichte Inbetriebnahme
- Schutz vor Wiederverwendung – seitliche Flügel verhindern ein Herausnehmen aus dem Gebinde
- Zeitaufwendige und kostenintensive Aufbereitung der Kunststoff- oder Edelstahlpumpe entfällt
- Geeignet für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen
- Inklusive Dichtungskappe gegen Verdunstung
- Hygienisch einzeln verpackt zum sicheren Einsetzen der Pumpe
- Dosiermenge: 1,5 ml pro Hub (nicht veränderbar)

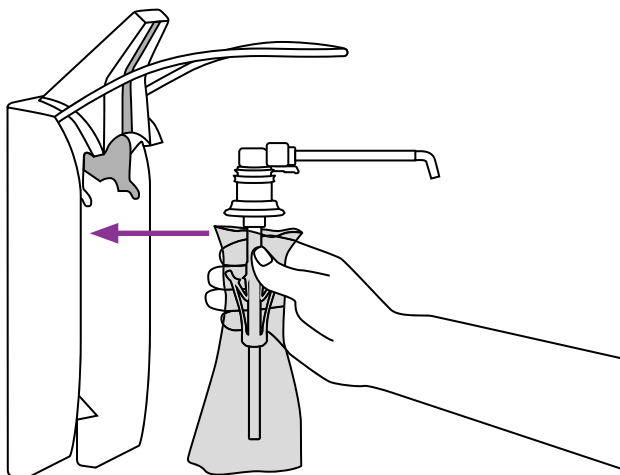

Die neue B. Braun Einwegpumpe gewährleistet nicht nur einen hohen Hygienestandard, sondern spart Ihnen zugleich kostbare Zeit durch die überflüssige Pumpenaufbereitung.



Halten Sie die Pumpe beim Einbau nur mithilfe der Umverpackung.

## SCHUTZ VOR WIEDERVERWENDUNG

Das leere Gebinde wird mit der Einmalpumpe entsorgt. Wird versucht, die Pumpe für eine weitere Nutzung aus der Flasche zu ziehen, löst sich das Saugrohr und fällt in das Gebinde. Die Pumpe wird dadurch unbrauchbar.

LIEFERFORM	VE	ART.-NR.
Einwegpumpe Wandspender plus		
für 500 ml-Flaschen	250 Stück	4401857
für 1.000 ml-Flaschen	200 Stück	4401858